

NEUHEITEN 2025



Schmerzlinderung bei Überlastung

BORT SellaTex® Plus - Quervain

Handgelenkorthese zur Immobilisierung
und Stabilisierung bei Tendovaginitis
de Quervain



Mit medialer Fensterung

Med

BORT DigiSoft® Vario-Fingerorthese

Sport

BORT MyoActive Sport Wadenstütze
und Asymmetric® Sport Kniebandage
mit Haftband

StabiloGen® Eco

Unser Bestseller mit Haftband kurz
jetzt in schwarz erhältlich

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®



BORT SellaTex® Plus - Quervain

Handgelenkorthese mit medialer Fensterung zur Immobilisierung und Stabilisierung



REF 112 160 | Pos.Nr. 23.07.02.2039

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur Stabilisierung des Daumengrund-, Daumensattel- und Daumenendgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- **Komplett zu öffnen**
- Länge: ca. 20 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- **Großes Fenster zur Entlastung des problematischen Bereichs** bei Tendovaginitis de Quervain
- Einfache, therapiegemäße Abrüstmöglichkeit des Daumenelements
- Langes Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl



Abrüstbare Daumenschiene zur einfachen Anpassung im Therapieverlauf

INDIKATIONEN

Tendovaginitis de Quervain, präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. Rhizarthrose, CTS

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk


	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

Spezielle Handgelenkorthese für die konservative Therapie der Tendovaginitis de Quervain

ÜBERLASTUNG & SCHMERZ

Die Sehnenscheidenentzündung im Bereich des daumenseitigen Handgelenks ist ein chronisches Überlastungssymptom und wird vor allem durch häufige Abduktion (Bewegung des Daumens von der Handfläche weg) verursacht.

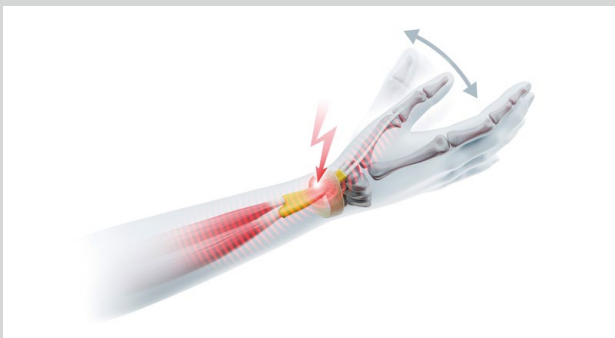

RUHIGSTELLUNG & LINDERUNG

Bei der konservativen Therapie stehen die Verhinderung von Überlastung und die Ruhigstellung des Gelenkbereichs im Mittelpunkt. Die **BORT SellaTex® Plus – Quervain** Handgelenkorthese hat eine stabilisierende Wirkung und immobilisiert das Daumengelenk. Sie kann dadurch schmerzauslösende Bewegungen verhindern.



NEU

BORT DigiSoft® Vario-Fingerorthese

Zur zuverlässigen Ruhigstellung



REF 112 790 | Pos.Nr. 23.07.01.0013

PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung
- Klettverschlüsse, variabel positionierbar
- **Komplett zu öffnen**

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Modulares Orthesen-System:



Handgelenkstabilisierung, abrüstbar

GRÖSSEN Umfang Mittelhand

	Größe 1	17 – 19 cm
	Größe 2	19 – 22 cm
	Größe 3	22 – 26 cm

rechts und links gleich

Med

NEUES DESIGN

BORT StabiloGen® Eco mit Haftband kurz

Jetzt endlich auch in schwarz erhältlich



REF 114 520 HK | Pos.Nr. 05.04.01.0138

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Doppel-Plus-Größen-System**, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: ■ silber ■ schwarz NEU


DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone** in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- **Kurze Ausführung** im Oberschenkelbereich, keine Verlängerung durch Silikonhaftband
- Angenehmer Tragekomfort
- Länge der Bandage in Größe 3, 32 cm

GRÖSSEN d-Maß f-Maß

	Größe 1	26 – 29 cm	32 – 36 cm
	Größe 2	29 – 33 cm	36 – 40 cm
	Größe 2+	29 – 33 cm	40 – 44 cm
	Größe 3	33 – 37 cm	40 – 44 cm
	Größe 3+	33 – 37 cm	44 – 48 cm
	Größe 4	37 – 41 cm	44 – 48 cm
	Größe 4+	37 – 41 cm	48 – 52 cm
	Größe 5	41 – 45 cm	52 – 56 cm
	Größe 5+	41 – 45 cm	56 – 60 cm
	Größe 5++	41 – 45 cm	60 – 64 cm
	Größe 6	45 – 49 cm	60 – 64 cm
	Größe 6+	45 – 49 cm	64 – 68 cm
	Größe 6++	45 – 49 cm	68 – 72 cm
	Größe 7	49 – 53 cm	68 – 72 cm
Größe 7+	49 – 53 cm	72 – 76 cm	

rechts und links gleich

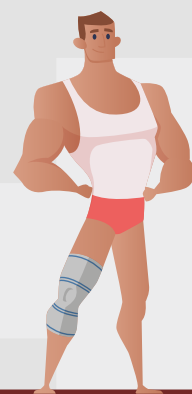

Med

Produktmodifikationen

Farbumstellungen



BORT MalleoStabil®-Orthese / MalleoStabil®-SOFT-Orthese / MalleoStabil® Air/Gel-Orthese

REF 100 500 / 100 520 / 100 540 | Pos.Nr. 23.02.02.0024

– Neue Farbe: ■ grau

Designumstellungen



BORT StabuloPro® Knieorthese

REF 182 150 | Pos.Nr. 23.04.03.1029

– Mit neuem Polkurgelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



BORT StabuloPro® Knieorthese offene Form

REF 182 300 | Pos.Nr. 23.04.03.2013

– Mit neuem Polkurgelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



BORT Generation Knieorthese

REF 215 400 | Pos.Nr. 23.04.03.1046

– Mit neuem Polkurgelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



BORT Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage

REF 114 510 | Pos.Nr. 23.04.05.0016

– Jetzt auch in den Größen 6 und 6+ erhältlich



BORT CoxaPro Hüftorthese

REF 201 400 | Pos.Nr. 23.05.01.0007

– Neu mit Angabe der jeweiligen f-Maße



BORT TalofX® Sprunggelenkorthese

REF 054 800 | Pos.Nr. 23.02.02.1017

– Neuer Schnitt
– Neues Klettverschluss-System
– Komplette zu öffnen für einfaches Anlegen

NEU

BORT MyoActive Sport Wadenstütze

Aktivbandage bei Muskelfaserriss und Muskelzerrungen



REF 116 500 SP | Pos.Nr. 05.06.01.0002

PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbereich
- Längen: 24 cm (small),
25 cm (medium),
26 cm (large; x-large)

FARBE: schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Wirkprinzip aus Kompression, konventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung
- Modernes Sport-Design
- Latexfreies Gestrick

Sport

GRÖSSEN

Wadenumfang

	small	bis 33 cm
	medium	33 – 38 cm
	large	38 – 43 cm
	x-large	43 – 47 cm

rechts und links gleich

NEU

BORT Asymmetric® Sport Kniebandage mit Haftband

Zur Korrektur des Patellagleitweges, auch in Plus- und Doppel-Plus Größen erhältlich



REF 114 700 SP H | Pos.Nr. 23.04.05.0005

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- **SOFTflex-3D-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen
- **Doppel-Plus-Größen-System**, dadurch sehr gute Passform
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBE: schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)
- Bandagenlänge in Größe 3: 35 cm

GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß

	Größe 1	26 – 29 cm	32 – 36 cm
	Größe 2	29 – 33 cm	36 – 40 cm
	Größe 2+	29 – 33 cm	40 – 44 cm
	Größe 3	33 – 37 cm	40 – 44 cm
	Größe 3+	33 – 37 cm	44 – 48 cm
	Größe 4	37 – 41 cm	44 – 48 cm
	Größe 4+	37 – 41 cm	48 – 52 cm
	Größe 5	41 – 45 cm	52 – 56 cm
	Größe 5+	41 – 45 cm	56 – 60 cm
	Größe 5++	41 – 45 cm	60 – 64 cm
	Größe 6	45 – 49 cm	60 – 64 cm
	Größe 6+	45 – 49 cm	64 – 68 cm
	Größe 6++	45 – 49 cm	68 – 72 cm
	Größe 7	49 – 53 cm	68 – 72 cm
	Größe 7+	49 – 53 cm	72 – 76 cm

rechts oder links angeben

Sport



COOLMAX® ist eine Marke von The Lycra Company.

NEUES DESIGN

BORT X-Walker

Das Orthesenprogramm zur Versorgung von Fuß- und Sprunggelenksverletzungen



BORT X-Walker lang

REF 101 300

Pos.Nr. 23.06.01.0081



BORT X-Walker kurz

REF 101 350


Pos.Nr. 23.06.01.0080



BORT X-Walker Achillo

REF 101 320

Pos.Nr. 23.06.01.1023

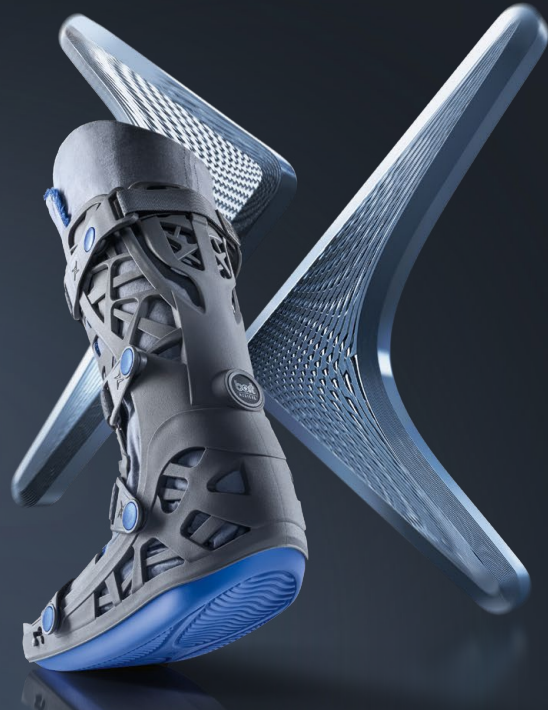

Großflächiges Vakuum-System

zur formschlüssigen Bettung und Stabilisierung. Das in den Polsterliner integrierte, mit Granulat gefüllte Vakuumkissen lässt sich durch die mitgelieferte Vakuumpumpe formschlüssig an die Fuß- bzw. Unterschenkelanatomie anpassen. Druckstellen können durch die gleichmäßige und individuell anpassbare Bettung vermieden werden.



Ersatzteile für BORT X-Walker



Liner-Set
(Linerbezug, Vakuumkissen und Pumpe)



Linerbezug



Vakuumpumpe



Set Fersenkeile



Vakuumpolster

⊕ Zubehör für alle BORT X-Walker

REF 100 370

BORT Unterziehstrumpf



REF 100 380

BORT Nässeschutzhülle



REF 100 390

BORT Schutzhülle für die Nacht



Med


⊕ Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: 07151/99200-0

BORT Lösungen erfüllen individuelle Anforderungen und Wünsche. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Außendienst beraten Sie hierzu umfassend und kompetent. Gerne vereinbaren wir einen persönlichen Termin mit Ihnen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH | Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

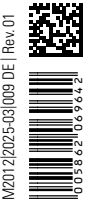

MZ012/2025-03/009 DE | Rev. 01